
진료안전을 위한 환자 고정 보호대

안전

- 몸체(body)부분과 헤드(head)부분의 메모리폼과 겉감의 벨벳은 환자에게 편안함과 안전함을 제공
- 진료시, 위치변동에도 효율적인 보호가능
- body 부분의 벨크로에 의한 효과적인 고정력
- 진료 중 head rest 효율적인 각도 변화 가능
- 분리형으로 사용목적에 따라 용도 가능
- 메모리폼을 넣고 빼기가 편리하며, 메모리폼을 제외한 모든 부분 물세탁 가능한 위생적인 의료기구





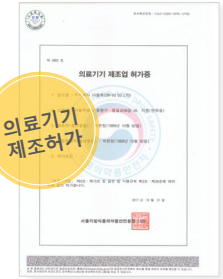

판매사 | ㈜디알뷰 문의처 070 · 7787 · 0459

제조사 | ㈜디알뷰 DROOVU
www.dr-vu.com · info@dr-vu.com · 070 · 7787 · 0459

주식회사 디알뷰는 인류의 건강을 위해 지식기반 제품을 꾸준히 연구개발하는 헬스케어 전문기업입니다.

환자진료 안전을 위한 환자 고정 보호대

HUGGY BUDDY



특허 제 10-1382636호 / 치과의자에 설치되는 유아용 안전시트

안전한 환자진료를 위한 환자 고정 보호대 **허기버디**

환자 고정 보호대 HUGGY BUDDY


본 제품은 메모리폼을 이용한 신체 속박기구로서
장애인 및 소아 환자 등의 진료 시 행동조절을 위한 기구입니다.

진료안전을 위한 환자 고정 보호대

허기버디 HUGGY BUDDY

구성

- 매트리스폼 I 헤드, 몸체 ■ 매트 I 헤드, 몸체 ■ 방수 매트
- 연결띠 I 머리띠, 어깨띠, 몸체띠, 무릎띠, 다리띠
  좌/우 손목띠 , 중앙 이음띠

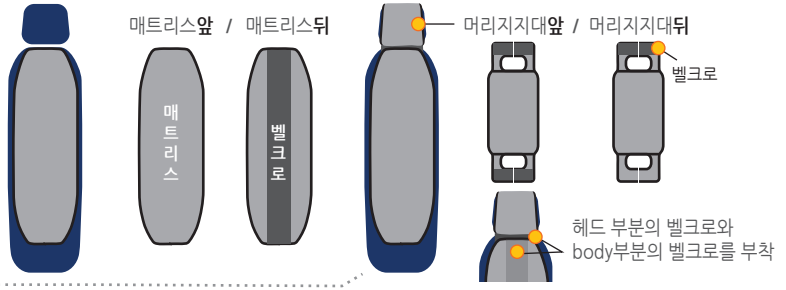

1 body 매트를 dental chair에 올려놓고, 헤드매트를 장착합니다.

2 헤드 매트는 반으로 접어 dental chair의 헤드 부분에 올려놓고 적당한 길이에 맞춰 헤드 부분을 감싼 뒤 헤드 부분의 벨크로와 body부분의 벨크로를 부착합니다.

3 body 부분의 벨크로에 어깨띠, 몸체띠, 무릎띠, 다리띠를 원하는 위치에 붙이고, 헤드 부분의 뒷면도 넓은 벨크로를 이용하여 환자의 머리띠를 부착하시면 됩니다.

4 어깨띠 부분은 X자 모양으로 고정하는 것이 좀더 고정력을 높일 수 있습니다.

5 어깨띠와 몸체띠가 조금 겹쳐지도록 부착하시면 치료 중 환자의 움직임을 더욱 줄일 수 있습니다.

6 환자의 다리가 가늘어서 고정이 약한 경우에는 인형이나 쿠션등을 이용하여 다리 사이에 끼우고 벨크로를 장착하시면 고정력을 강화시킬 수 있습니다.

