INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

1. Manufacturer Name
제조사

DR-VU (Co.,Ltd)
(주)디알뷰

Registered no. 5882

2. Manufacturer Address Manufacturing site
주소

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea
서울시 중랑구 동일로96길40, B1

3. Product name
품목명

Lead-free Radiation Shielding bib
방사선방어용흉부앞치마

4. Product License
품목허가번호

17-1263

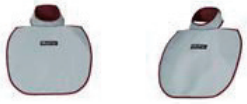
5. Specification
제품사양

No	Model name	mmPb	Size(cm)
1	Rad-Ban NS/L	0.25mmPb 이상	www.dr-vu.com 웹사이트 참조
2	Rad-Ban TC		
3	Rad-Ban BF3		

6. Intended purpose
사용목적

Apron to defend against radiation exposure to the chest
흉부에 노출되는 방사선을 방어하기 위한 앞치마

7. Appearance and Structure
외형 및 구조

No	Model name	외형 및 구조
1	Rad-Ban NS/L	
2	Rad-Ban TC	

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

3	Rad-Ban BF3	

8. How to Use
사용방법

A. Preparations before use

a. Before use, check the condition of the product to see if there is any damage before wearing it.

b. The users should study how to use it, if not knowing how to use it, get help from other staff.

B. How to use it

a. Wear with the logo label facing forward.

b. Use the product's Velcro to properly wear it on the user's body.

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 상태를 확인하여 파손이 있는지 확인한 후 착용한다.
2. 사용자는 사용법을 인지해야 하며, 사용법을 모르면 다른 직원의 도움을 받아야 합니다.

나. 사용방법

1. 로고가 앞을 향하도록 착용한다.
2. 벨크로를 이용하여 사이즈조절을 한다.

9. Precautions for use
사용시 주의사항

1. Be careful not to scratch the surface.
2. Don't fold and leave it pressed by other heavy things.
3. Do not use it for any purpose other than the purpose.
4. Inspect periodically and replace any cracks or tears.

1. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의 한다.
2. 접어서 보관하거나 눌리지 않도록 한다.
3. 용도 이외에 다른 목적으로 사용하지 않는다.
4. 주기적으로 검사하여 균열 및 찢김이 있을 시에는 교체한다.



DO NOT IRON/ DO NOT DRY CLEANING/ DO NOT AUTOCLAVE/
DO NOT BLEACH/ DO NOT USE ALKALI DETERGENTS

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

WHEN REUSE
The device is supplied non-sterile and be reused after simple surface cleaning with water paper or alcohol paper if any stain.

이 제품은 멸균제품이 아니며 사용 후 물티슈나 알콜 티슈로
표면 세척을 한 후에 다시 사용 가능하다.

10. Storage and management after use
보관방법 및 사용후 관리방법

1. After using it, with wet tissue or soft cloth, wipe it off, and dry it sufficiently.
2. If there is a stain on the surface of the product, remove it immediately using a wet tissue or a wet cloth
3. Store the product neatly after use.
4. Avoid folding or pressing.
5. Damage should be avoided during storage or use.
6. Room temperature storage

1. 사용 후 물티슈 또는 부드러운 천에 물을 묻혀 짜낸 후 닦고 충분히 건조 해 준다.
2. 제품 표면에 오명 물질이 묻은 경우 물티슈 또는 물걸레를 이용하여 즉시 제거한다.
3. 제품은 사용 후 가지런히 펴서 보관한다.
4. 접히거나 눌리지 않도록 한다.
5. 보관이나 사용 중 파손을 피해야 한다.
6. 실온보관

11. Indication
권장사용

Use to protect the body from X-rays as much as possible when working in an environment at risk of radiation exposure.

방사선 노출 위험이 있는 환경에서 작업하는 경우 최대한 X선으로부터 신체를
보호하기 위해서 사용합니다.

12. Contraindication
사용금지

Areas that are required of X-ray monitoring should not be covered by this device, otherwise X-ray monitoring could not be implemented.

X선 모니터링이 필요한 영역은 이 장치에서 다루지 않아야 합니다.
그렇지 않으면 X선 모니터링을 구현할 수 없습니다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

13. Labeling
라벨

Inside the bib, you will find the identifies the model name, size, lead equivalency, date of manufacture, site of manufacture, UDI-DI, information of manufacturer

흉부앞치마의 안쪽에 모델명, 사이즈, 성능, 제조일자, 제조장소, UDI-DI 및 제조자 정보를 확인 가능

Model name	UDI-DI	Bar code
Rad-Ban NS	(01)08800033600916	(01)08800033600916
Rad-Ban NL	(01)08800033600909	(01)08800033600909
Rad-Ban TC	(01)08800033600923	(01)08800033600923
Rad-Ban BF3	(01)08800033600565	(01)08800033600565

14. Package unit
포장단위

1pcs/box
Size : 60*35*15cm

1피스/박스
사이즈 : 60*35*15cm

15. Expiry date
유효기간

2 years from manufacturing date

WARNING - DO NOT MODIFY PRODUCTS AS THIS MAY AFFECT PROTECTION AND INVALIDATE WARRANTY
방사선 방어 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 수정이나 변형하지 마십시오. 보증이 무효화됩니다.

본 제품은 의료 기기임

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com