INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

1. Manufacturer Name
제조사

DR-VU (Co.,Ltd)
(주)디알뷰

Registered no. 5882

2. Manufacturer Address Manufacturing site
주소

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea
서울시 중랑구 동일로96길40, B1

3. Product name
품목명

Lead-free Radiation Shield, curtain
방사선방어용커튼

4. Product License
품목허가번호

22-472

5. Specification
제품사양

Model name	mmPb	Size(cm)	Weight(kg) allowance ±7%
Rad-Ban B/C025	0.25	100*60*70	6.7
Rad-Ban B/C035	0.35	100*60*70	7.5
Rad-Ban B/C050	0.50	100*60*70	13.2
Rad-Ban B/C100	1.00	100*60*70	27.0

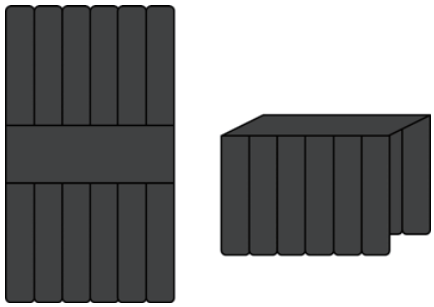
6. Intended purpose
사용목적

Radiation protection curtains to reduce radiation exposure to medical staff and patients by exposure to X-rays irradiated from the lower part of the patient's bed when using equipment such as Angio, Remote, and C-Arm for radiation treatment and diagnosis

방사선 치료 및 진단을 위한 Anglo, Remote 및 C-Arm 등의 장비 이용 시 환자의 침대 하부에서 조사되는 엑스선의 노출에 의한 시술자 및 환자의 방사선 피폭을 줄이기 위한 방사선방어용커튼

INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

7. Appearance and Structure
외형 및 구조

Rad-Ban B/C	

8. How to Use
사용방법

A. Preparations before use

1. Check the condition of the product before use to see if it is damaged and use it.

B. How to use it

1. Place the product on the table so that the side with the care label is in contact with the bedside
2. Spread the table cover so that it is in the middle of the table, and lower the wings
3. Make sure that the wings do not fold or open.

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 상태를 확인하여 파손이 있는지 확인한 후 사용한다.

나. 사용방법

1. 테이블 위에 케어라벨이 붙어있는 면을 침대면과 맞닿도록 제품을 올려 놓는다.
2. 테이블 덮개 부분이 테이블의 가운데에 오도록 가지히 펴서 놓고 날개부분을 아래로 내린다.
3. 날개부분이 접히거나 벌어지지 않도록 가지런히 한다.

9. Precautions for use
사용시 주의사항

1. Be careful not to scratch the surface.
2. Don't fold and leave it pressed by other heavy things.
3. Do not use it for any purpose other than the purpose.
4. Inspect periodically and replace any cracks or tears.

1. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의 한다.
2. 접어서 보관하거나 눌리지 않도록 한다.
3. 용도 이외에 다른 목적으로 사용하지 않는다.
4. 주기적으로 검사하여 균열 및 찢김이 있을 시에는 교체한다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com



DO NOT IRON/ DO NOT DRY CLEANING/ DO NOT AUTOCLAVE/
DO NOT BLEACH/ DO NOT USE ALKALI DETERGENTS

WHEN REUSE
The device is supplied non-sterile and be reused after simple surface cleaning with water paper or alcohol paper if any stain.

이 제품은 멸균제품이 아니며 사용 후 물티슈나 알콜 티슈로
표면 세척을 한 후에 다시 사용 가능하다.

10. Storage and management after use
보관방법 및 사용후 관리방법

1. After using it, with wet tissue or soft cloth, wipe it off, and dry it sufficiently.
2. If there is a stain on the surface of the product, remove it immediately using a wet tissue or a wet cloth
3. Store the product neatly after use.
4. Avoid folding or pressing.
5. Damage should be avoided during storage or use.
6. Room temperature storage

1. 사용 후 물티슈 또는 부드러운 천에 물을 묻혀 짜낸 후 닦고 충분히 건조 해 준다.
2. 제품 표면에 오명 물질이 묻은 경우 물티슈 또는 물걸레를 이용하여 즉시 제거한다.
3. 제품은 사용 후 가지런히 펴서 보관한다.
4. 접히거나 눌리지 않도록 한다.
5. 보관이나 사용 중 파손을 피해야 한다.
6. 실온보관

11. Indication
권장사용

Use to protect the body from X-rays as much as possible when working in an environment at risk of radiation exposure.

방사선 노출 위험이 있는 환경에서 작업하는 경우 최대한 X선으로부터 신체를
보호하기 위해서 사용합니다.

12. Contraindication
사용금지

Areas that are required of X-ray monitoring should not be covered by this device, otherwise X-ray monitoring could not be implemented.

X선 모니터링이 필요한 영역은 이 장치에서 다루지 않아야 합니다.
그렇지 않으면 X선 모니터링을 구현할 수 없습니다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

13. Labeling
라벨

Inside the curtain, you will find the identifies the curtain name, size, lead equivalency, date of manufacure, site of maufacture, UDI-DI, information of manufacturer

커튼의 안쪽에 모델명, 사이즈, 성능, 제조일자, 제조장소, UDI-DI 및 제조자 정보를 확인 가능

Model name	UDI-DI	Bar code
Rad-Ban B/C025	(01)08800033600954	
Rad-Ban B/C035	(01)08800033600961	
Rad-Ban B/C050	(01)08800033600978	
Rad-Ban B/C100	(01)08800033600985	

14. Package unit
포장단위

1ea/box
Size : 60*35*15cm

1개입/박스
사이즈 : 60*35*15cm

15. Expiry date
유효기간

2 years from manufacturing date

WARNING - DO NOT MODIFY PRODUCTS AS THIS MAY AFFECT PROTECTION AND INVALIDATE WARRANTY
방사선 방어 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 수정이나 변형하지 마십시오. 보증이 무효화됩니다.

본 제품은 의료 기기임

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com