INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

1. Manufacturer Name
제조사

DR-VU (Co.,Ltd)
(주)디알뷰

Registered no. 5882

2. Manufacturer Address Manufacturing site
주소

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea
서울시 중랑구 동일로96길40, B1

3. Product name
품목명

Shield, radiation
기타방사선방어용기구

4. Product License
품목허가번호

17-1247

5. Specification
제품사양

Model name	mmPb	Size(cm)		
		머리둘레	높이(세로)	가로
Rad-Ban H1	0.25	56이상	15	20
Rad-Ban H2	0.25	50이상	13	27
Rad-Ban H3	0.25	50이상	13 (귀덮개 길이 10)	27
Radi-Free	0.04	-	11	20

6. Intended purpose
사용목적

In the case of radiation defense caps, the anatomical structure of the area to be observed during radiography is not covered and areas not required for diagnosis are protected from radiation.

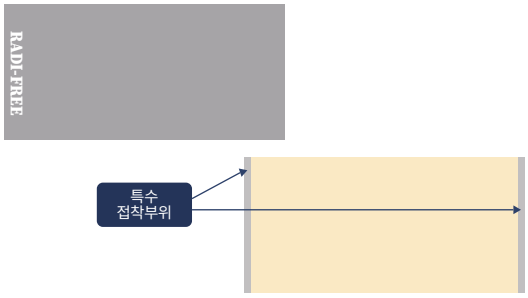
방사선 방어용 모자의 경우 방사선 촬영 시 관찰할 부위의 해부학적 구조가 가려짐 없고 진단 시 필요치않는 부위를 방사선으로부터 보호하기 위함이다.

Radi-Free is located in the area where the beam of X-ray generators such as C-Arm and Angiography is irradiated to reduce X-ray exposure of patients and medical staff.

Radi-Free는 C-Arm, Angio graphy 등의 엑스선 발생장치의 빔이 조사되는 부분에 위치시켜 환자 및 술자의 엑스선의 피폭을 줄여 준다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

7. Appearance and Structure
외형 및 구조

Rad-Ban H1/ H2/ H3	
Radi-Free	

8. How to Use
사용방법

A. Preparations before use

1. Clean the area where the product will be located on the radiation generator.
2. Open the product and check the condition of the product for wrinkles, tears, damage, etc.

B. How to use it

1. Remove the adhesive tape protection film on the special adhesive part.
2. Attach the product so that the location of the beam is covered.

가. 사용 전 준비사항

1. 방사선 발생장치에 제품을 위치시킬 부위를 깨끗하게 한다.
2. 제품을 개봉하여 구김, 찢김, 파손 등이 있는지 제품의 상태를 확인한다.

나. 사용방법

1. 특수 접착부위의 접착 테이프 보호 필름을 제거한다.
2. 빔이 나오는 위치가 가려 지도록 제품을 부착시킨다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

INSTRUCTION FOR USE
사용설명서

9. Precautions for use
사용시 주의사항

1. Do not wrinkle or break.
2. Avoid scratches on the surface.
3. Avoid foreign substances.
4. Do not fold and store or press down.
5. Store in a case
6. Do not use it if there is a wrinkle, breakage, tear, etc.

1. 구김이나 파손되지 않도록 한다.
2. 표면에 흠집이 생기지 않도록 한다.
3. 이물질 등이 묻지 않도록 한다.
4. 접어서 보관하거나 눌리지 않도록 한다.
5. 케이스에 넣어 보관 한다
6. 구김이나 파손, 찢김 등이 있을시 사용하지 않는다.
7. 한번 사용한 제품은 폐기한다.



DO NOT IRON/ DO NOT DRY CLEANING/ DO NOT AUTOCLAVE/
DO NOT BLEACH/ DO NOT USE ALKALI DETERGENTS

WHEN REUSE
The device is supplied non-sterile and be reused after simple surface cleaning with water paper or alcohol paper if any stain.

이 제품은 멸균제품이 아니며 사용 후 물티슈나 알콜 티슈로
표면 세척을 한 후에 다시 사용 가능하다.

10. Storage and management after use
보관방법 및 사용후 관리방법

1. Room temperature storage
2. Dispose of once used products.

1. 실온보관
2. 한 번 사용한 제품은 폐기한다.(Radi-Free)

11. Indication
권장사용

Use to protect the body from X-rays as much as possible when working in an environment at risk of radiation exposure.
방사선 노출 위험이 있는 환경에서 작업하는 경우 최대한 X선으로부터 신체를 보호하기 위해서 사용합니다.

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com

12. Contraindication
사용금지

Areas that are required of X-ray monitoring should not be covered by this device, otherwise X-ray monitoring could not be implemented.

X선 모니터링이 필요한 영역은 이 장치에서 다루지 않아야 합니다.
그렇지 않으면 X선 모니터링을 구현할 수 없습니다.

13. Labeling
라벨

Inside the curtain, you will find the identifies the curtain name, size, lead equivalency, date of manufacure, site of maufacture, UDI-DI, information of manufacturer

박스포장에 모델명, 사이즈, 성능, 제조일자, 제조장소,
UDI-DI 및 제조자 정보를 확인 가능

Model name	UDI-DI	Bar code
Rad-Ban H1	(01)08800033601210	
Rad-Ban H2	(01)08800033601227	
Rad-Ban H3	(01)8800033601258	
Radi-Free	(01)08800033601241	

14. Package unit
포장단위

Model name	Packing size(cm)	Package unit
Rad-Ban H1/2/3	22*22*17	1pcs / box
Radi-Free	12*21*2	5ea*4packs / box

15. Expiry date
유효기간

2 years from manufacturing date

WARNING - DO NOT MODIFY PRODUCTS AS THIS MAY AFFECT PROTECTION AND INVALIDATE WARRANTY
방사선 방어 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 수정이나 변형하지 마십시오. 보증이 무효화됩니다.

본 제품은 의료 기기임

40, Dongil-ro 96-gil, Jungnang-gu,Seoul, Republic of Korea 서울시 중랑구 동일로96길40, B1
TEL. +82 70 7787 0459 / FAX. +82 2435 0459 / Email. therese88@dr-vu.com