열람용

제신 18-1345 호

의료기기 제조 신고증

(업 허가번호 : 제 5882 호)

구 분	[✔] 제조 / [ ] 수입	[✔] 품목 / [ ] 품목류	
명 칭 (제품명, 품목명, 모델명)	주식회사 디알뷰(DR-VU CO.LTD) · Greenline EVA,방사선방어용앞치마,Rad-Ban BL 외 55건	분류번호(등급)	A15010.01 (1)
모 양 및 구 조	별첨		
원 재 료	해당없음		
성 능	별첨		
사 용 목 적	별첨		
사 용 방 법	별첨		
사용 시 주의사항	별첨		
제조(수입)업자 정보	제조(수입)업자 : 주식회사 디알뷰(DR-VU CO.LTD), 서울특별시 중랑구 동일로96길 40 지층(면목동) 제조원 : 상동		
허 가 조 건	없음		
소 재 지	서울특별시 중랑구 동일로96길 40 지층(면목동)		
비 고	유효기간 (2020.10.08 ~ 2029.12.31)		

「의료기기법」 제6조 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 신고를 수리합니다.

2018 년 10 월 16 일

한국의료기기안전정보원장 (인)

National Institute of Medical Device Safety Information
NIDS

열람용

변경 및 처분 사항 등

년 월 일	내 용
2018-10-16	최초허가
2019-08-13	모델명 (Rad-Ban BL외 14건(Rad-Ban TPV/TPSL외 1건 추가))
2019-08-13	모양및구조-치수 (모델명 추가에 따른 변경)
2019-08-13	모양및구조-외형 (모델명 추가에 따른 변경)
2019-11-27	성능 (모델명 추가에 따른 변경)
2019-11-27	모델명 (Rad-Ban BL외 16건(Rad-Ban BF2외 1건 추가))
2019-11-27	모양및구조-외형 (모델명 추가에 따른 변경)
2019-11-27	모양및구조-치수 (모델명 추가에 따른 변경)
2022-02-08	모양및구조-외형 (모델(Rad-Ban BF5) 추가)
2022-02-08	모양및구조-치수 (모델(Rad-Ban BF5) 추가)
2022-02-08	모델명 (모델(Rad-Ban BF5) 추가)
2022-04-08	제품명 (29.제품명 추가)
2022-07-11	성능 (모델 (Rad-Ban B 외 45건)추가, 삭제(Rad-Ban P 외 7건), 성능 변경)

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

2022-07-11	모양및구조-치수 (모델 (Rad-Ban B 외 45건)추가, 삭제(Rad-Ban P 외 7건))
2022-07-11	사용시 주의사항 (문구 추가)
2022-07-11	모델명 (모델 (Rad-Ban B 외 45건)추가, 삭제(Rad-Ban P 외 7건))
2022-07-11	모양및구조-외형 (모델 (Rad-Ban B 외 45건)추가, 삭제(Rad-Ban P 외 7건), 색상옵션 추가)

제 품 명
Greenline EVA

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

모 델 명	
일련번호	모 델 명
1	Rad-Ban BL
2	Rad-Ban BM
3	Rad-Ban BS
4	Rad-Ban C
5	Rad-Ban A2L
6	Rad-Ban A2S

열람용

7	Rad-Ban OPL
8	Rad-Ban OPM
9	Rad-Ban OPS
10	Rad-Ban BF
11	Rad-Ban B
12	Rad-Ban BXL
13	Rad-Ban BXXL
14	Rad-Ban CR
15	Rad-Ban PS
16	Rad-Ban PM
17	Rad-Ban PL
18	Rad-Ban P2L
19	Rad-Ban P2XL
20	Rad-Ban P2XXL

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열람용

21	Rad-Ban P3L
22	Rad-Ban P3XL
23	Rad-Ban P3XXL
24	Rad-Ban AS
25	Rad-Ban AM
26	Rad-Ban AL
27	Rad-Ban A2M
28	Rad-Ban BFL
29	Rad-Ban BFXL
30	Rad-Ban BFXXL
31	Rad-Ban BF2S
32	Rad-Ban BF2M
33	Rad-Ban BF2L
34	Rad-Ban BF2XL

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열람용

35	Rad-Ban BF2XXL
36	Rad-Ban BF5S
37	Rad-Ban BF5M
38	Rad-Ban BF5L
39	Rad-Ban BF5XL
40	Rad-Ban BF5XXL
41	Rad-Ban PA2S
42	Rad-Ban PA2M
43	Rad-Ban PA2L
44	Rad-Ban PA2XL
45	Rad-Ban PA2XXL
46	Rad-Ban PA3S
47	Rad-Ban PA3M
48	Rad-Ban PA3L

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열람용

49	Rad-Ban PA3XL
50	Rad-Ban PA3XXL
51	Rad-Ban OPXL
52	Rad-Ban TPS
53	Rad-Ban TPM
54	Rad-Ban TPL
55	Rad-Ban TPXL
56	Rad-Ban TPXXL

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

제조원	
일련번호	제조의뢰자
일련번호	제조자

열람용

모양 및 구조 - 작용원리

본 제품은 방사선을 방어하기 위한 앞치마이다. 방사선 촬영 시 관찰할 부위의 해부학적 구조가 가려짐 없고 진단 시 필요치 않는 부위를 차폐하며 영상취득이 가능토록 한 구조로 특수봉재-탄성체연결-중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화 한 제품이다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

모양 및 구조 - 외형

가. 외형사진

No.	모델명	외형
1	Rad-Ban B	
2	Rad-Ban BS Rad-Ban BM Rad-Ban BL Rad-Ban BXL Rad-Ban BXXL	
3	Rad-Ban C	
4	Rad-BanCR	

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열 람 용

5	Rad-Ban PS	
	Rad-Ban PM	
	Rad-Ban PL	
6	Rad-Ban P2L	
	Rad-Ban P2XL	
	Rad-Ban P2XXL	
7	Rad-Ban P3L	
	Rad-Ban P3XL	
	Rad-Ban P3XXL	
8	Rad-Ban AS	
	Rad-Ban AM	
	Rad-Ban AL	
9	Rad-Ban A2S	
	Rad-Ban A2M	
	Rad-Ban A2L	

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열 람 용

10	Rad-Ban BF Rad-Ban BFL Rad-Ban BFXL Rad-Ban BFXXL	
11	Rad-Ban BF2S Rad-Ban BF2M Rad-Ban BF2L Rad-Ban BF2XL Rad-Ban BF2XXL	
12	Rad-Ban BF5S Rad-Ban BF5M Rad-Ban BF5L Rad-Ban BF5XL Rad-Ban BF5XXL	
13	Rad-Ban PA2S Rad-Ban PA2M Rad-Ban PA2L Rad-Ban PA2XL Rad-Ban PA2XXL	
14	Rad-Ban PA3S Rad-Ban PA3M Rad-Ban PA3L Rad-Ban PA3XL Rad-Ban PA3XXL	

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

열 람 용

15	Rad-Ban OPS	
	Rad-Ban OPM	
	Rad-Ban OPL	
	Rad-Ban OPXL	
16	Rad-Ban TPS	
	Rad-Ban TPM	
	Rad-Ban TPL	
	Rad-Ban TPXL	
	Rad-Ban TPXXL	

나. 외형설명

1. Rad-Ban B

방사선 촬영 시 사용되는 방사선방어용 앞치마. 각 부위별 패턴이 설계, 제작되고 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화 한 구성.



(1) 신체/생식선차폐부
전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 차폐되도록 한다.
(2) 후방보호대
경추부위에서 중첩 설계되어 차폐효과를 극대화시키고 허리고정부와 일체로 연결된다.
(3) 하체(생식기관)보호부
2개의 수직절개연결부-중복차폐를 시행하고 서고 앉는 활동 시 유연성을 제공한다.
(4) 어깨연결패드
전/후방 신체보호부가 탄성체로 연결되고 이를 벨크로로 고정할 수 있는 차폐원단이 들어간 패드가 차폐누설을 막고 전방에서 이중차폐를 제공하여 2차 산란방사선에 대한 보호를 제공한다.

2. Rad-Ban BS/ BM/ BL/ BXL/ BXXL

방사선 촬영 시 사용되는 방사선방어용 앞치마. 각 부위별 패턴이 설계, 제작되고 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화 한 구성.
5개의 사이즈(S/M/L/XL/XXL)로 구성.




'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

(1) 신체/생식선차폐부
전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 차폐되도록 한다.
(2) 후방보호대
경추부위에서 중첩 설계되어 차폐효과를 극대화시키고 허리고정부와 일체로 연결된다.
(3) 하체(생식기관)보호부
2개의 수직절개연결부-중복차폐를 시행하고 서고 앉는 활동 시 유연성을 제공한다.

3. Rad-Ban C

방사선 촬영시 방사선에 대한 영향이 크고, 조기에 방사선에 노출되기 쉬운 소아를 위한 방어복. 갑상선과 목부위에 방어가 최대한 이뤄지도록 목 부위 보호대와 가슴과 생식선을 보호하도록 구성.
치수는 one-size이다.



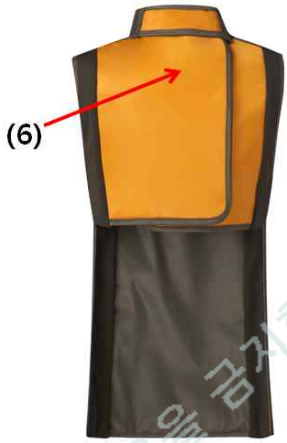

(1) 후방차폐
특허 적용 구조로서 후방에서 오는 1차 방사선으로부터 목부위(갑상선)가 보호되며 목부위에서 피부밀착을 최대한 유도한다.

(2) 측방탄성연결부
전-후방차폐부를 목 부위에서 피부밀착을 최대한 유도한다.

(3) 전방갑상선차폐부
양측의 차폐부위가 중첩되게 벨크로로 고정하며 흉부에 벨크로로 고정하여 전방 견인하여 부착되어 목과 밀착된다.

(4) 가슴-생식선 보호부
일체형 구조로 가슴과 생식선을 보호한다.

(5) 전방-후방 연결부
체형에 맞도록 신체보호부가 탄성체로 연결되어 연령별 신체 크기가 다양한 소아에게 적용하기 용이하다.

(6) 후방보호대
양측에서 차폐보호대가 경추 부위에서 중첩되어 차폐효과를 극대화하도록 벨크로로 고정한다.

4. Rad-Ban CR

방사선 촬영 시 방사선에 대한 영향이 크고 조기에 방사선에 노출되기 쉬운 소아를 위한 방어복. Reversible 디자인으로 아이들의 선호에 맞게 착용할 수 있는 one-size 어린이용 방어복.

열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.



(1) 신체/생식선차폐부
전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 차폐되도록 한다. 후방보호대는 양측에서 차폐보호대가 경추 부위에서 중첩되어 차폐효과를 극대화하도록 벨크로로 고정한다.
(2) 사이즈 조절부
사이즈 조절을 위해서 벨크로로 되어있음

5. Rad-Ban PS/ PM/ PL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 체부 및 생식선을 방호하는 앞판, 등판으로 구성. 3개의 사이즈(S/M/L)로 구성.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제나 도용을 금지함'



(1) 신체(생식기관)보호부

흉부의 종격동과 하체의 생식선부위가 중복 차폐되도록 벨크로로 고정하며 사이즈조절이 가능하며, 서고 앉는 활동 시 유연성을 제공한다.

(2) 후방보호부

후방차폐

6. Rad-Ban P2L/P2XL/P2XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 치과의사, 방사선사 등)를 위한 방사선방어용앞치마. 체부 및 생식선 보호대로 구성. 3개의 사이즈(L/XL/XXL)로 구성.



'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

(1) 신체/생식선보호부

전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 이중 중첩 차폐되도록 고정한다.

(2) 후방보호부

후방차폐

(3) 전방-후방 연결부

전-후방 신체보호부가 탄성체로 연결되어 진료 시 활동의 편의성을 도모하고 차폐원단으로 덮어 차폐누설을 막고 이중차폐를 제공함으로써 360도 완전 차폐와 방사선 구역 내 2차 산란방사선에 대한 방사선 노출을 막는 역할을 한다.

(4) 고정용 허리띠

허리띠에 고정용 버클을 부가하여 방어복이 척추와 등에 주는 하중을 분산한다.

7. Rad-Ban P3L/ P3XL/ P3XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 치과의사, 방사선사,등)를 위한 방어복. 체부 및 생식선 보호대로 구성. 3개의 사이즈 (L/XL/XXL)로 구성.



'본 문서는 열람용으로서 무단 복제와 도용을 금지합니다.'

(1) 신체/생식선보호부
전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 이중 중첩 차폐되도록 고정한다.
(2) 후방보호부
후방차폐
(3) 허리 보호대
척추와 등에 주는 하중을 분산하며 허리지지대 역할을 한다.
(4) 고정용 허리띠
허리 보호대와 연결된 일체형으로 특수 탄성체로서 허리 사이즈 조절할 수 있도록 벨크로 부착.

8. Rad-Ban AS/ AM/ AL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 목(갑상선)보호대, 체부 및 생식선 보호대를 일체형으로 구성.



본 문서는 열람용으로 무단 복제와 도용을 금지합

(1) 신체/생식선보호부
신체부위와 생식선 부위를 방호하여 앞판 전체부위를 차폐원단으로 차폐하고 뒤판은 필요에 따라 기장과 차폐원단의 겹 수를 조절할 수 있다.
(2) 목(갑상선)보호부
인체적합성 패턴의 설계로 등의 목 부위에 카라의 형태로 부착 고정되어 있어 평상 시 오픈 상태에 있다가 작업 시 방호 목적에 따라 갑상선 차폐를 시행할 수 있도록 한다.
(3) 측하방확장보호부
진료 중 움직임에 의해 발생되는 미세 누설을 예방하여 차폐효과를 얻으며 몸판과의 겹침으로 이중의 차폐효과를 낸다.
(4) 어깨착탈부
전-후방 편측에 벨크로로 고정되는 방식으로 체형에 따라 조절 고정되고 작업 시 빠른 탈착이 가능하다.
(5) 고정용 허리띠
탄성용 허리띠에 고정용 버클을 부가하여 방어복이 척추와 등에 주는 하중을 분산한다.
(6) 업무용 주머니
작업자가 필요한 서류나 물건을 3부분으로 분류된 주머니에 분류하여 보관할 수 있다.

9. Rad-Ban A2S/ A2M/ A2L

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 탈부착이 가능한 목(갑상선) 보호대, 체부 및 생식선 보호대로 구성. 3개의 사이즈(S/M/L)로 구성.



본 자료는 열람용으로 무단 복제와 도용을 금지함.

열 람 용

(1) 신체/생식선보호부
신체부위와 생식선 부위를 방호하기 위하여 몸판 전체 부위를 차폐원단으로 차폐한다.
(2) 목(갑상선)보호부
평상시 양 어깨 위에 벨크로로 고정하여 흉부 위에 고정되며 작업 시 방호 목적에 따라 탈부착으로 조절 가능하다.
(3) 하방확장보호부
진료 중 움직임에 의해 발생되는 미세 누설을 예방하여 차폐효과를 얻으며 몸판과의 겹침으로 갑상선과 유방(선) 조직을 차폐하는 이중의 효과를 낼 수 있다.
(4) 어깨착탈부위
어깨와 등 부위를 신체 밀착시켜 작업 시 하중 분산을 유도하며 보조 벨트로 흘러내림을 방지한다.
(5) 고정용 허리띠
허리띠에 착탈용 버클을 부가하여 방어복이 척추와 등에 주는 하중을 분산한다.
(6) 업무용주머니
작업자가 필요한 서류나 물건을 보관할 수 있다.

10. Rad-Ban BF/ BFL/ BFXL/ BFXXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 체부 및 생식선 보호대로 구성. 각 부위별 패턴이 인체해부학적 구조에 맞게 설계, 제작. 4개의 사이즈로 구성.



(1) 신체/생식선보호부
전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 차폐되도록 한다.
(2) 후방여밈
뒤여밈을 혼자서도 착용 가능하며 사이즈 조절을 할 수 있다.

11. Rad-Ban BF2S/ BF2M/ BF2L/ BF2XL/ BF2XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 각 부위별 패턴이 설계, 제작되고 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화한 구성. 5개의 사이즈(S/M/L/XL/XXL)로 구성.



(1) 전방보호부
신체전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위를 보호한다.
(2) 사이즈조절부
사이즈 조절을 하여 허리의 하중을 분산시켜주는 역할을 한다.
(3) 허리보호대
네오프렌이라는 탄성체를 이용하여 허리를 지지하여 하중을 분산시켜주는 역할을 한다.
(4) 사이즈조절 손잡이
탄성체와 연결되어 벨크로로 사이즈 조절할 수 있는 손잡이

12. Rad-Ban BF5S/ BF5M/ BF5L/ BF5XL/ BF5XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 방사선사, 간호사, 치과의사 등)를 위한 방사선방어용앞치마. 각 부위별 패턴이 설계, 제작되고 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화한 구성. 5개의 사이즈(S/M/L/XL/XXL)로 구성.

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.



(1) 전방보호부
신체전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위를 보호한다.
(2) 허리벨트
후방의 네오프렌의 탄성체와 연결되어 허리 사이즈조절할 수 있는 벨크로 부착된 허리 벨트
(3) 어깨끈
어깨와 등 부위를 신체 밀착시켜 작업 시 하중 분산을 유도
(4) 어깨착탈부
어깨 끈이 흘러내리지 않도록 벨크로가 부착된 착탈부.
(5) 후방허리지지대
네오프렌의 탄성체로 하중 분산을 유도함과 동시에 허리 지지대 역할
(6) 업무용 주머니와 이름표
작업자의 필요한 물건을 넣을 수 있는 주머니와 이름표

13. Rad-Ban PA2S/ PA2M/ PA2L/ PA2XL/ PA2XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실, 치과방사선 촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 의사, 치과의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 또는 환자를 위한 방사선방어용앞치마. 각 부위별 패턴이 설계 제작. 갑상선보호대와 일체형 앞치마. 5개의 사이즈 (S/M/L/XL/XXL)로 구성.

본 문서는 열람용으로써 무단 복제와 도용을 금지함.



(1) 전방보호부
신체전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위를 보호한다.
(2) 목(갑상선)보호부
목 부위에 카라의 형태로 부착 고정되어 있어 따로 갑상선보호대를 착용하지 않아도 신속하게 차폐할 수 있는 역할
(3) 어깨끈
어깨와 등 부위를 신체 밀착시켜 작업 시 하중 분산을 유도
(4) 어깨보조 벨트
어깨끈이 흘러내리지 않도록 어깨보조 벨트로 조절
(5) 허리벨트
허리 사이즈를 조절하며, 하중 분산을 유도

14. Rad-Ban PA3S/ PA3M/ PA3L/ PA3XL/ PA3XXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 방사선사, 간호사, 치과의사, 등)를 위한 방사선방어용앞치마. 각 부위별 패턴이 설계, 제작 되고 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화한 구성. 목보호대 일체형. 5개의 사이즈(S/M/L/XL/XXL)로 구성.

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.




(1) 전방보호부
신체전방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위를 보호한다.
(2) 사이즈조절부
사이즈 조절을 하여 허리의 하중을 분산시켜주는 역할을 한다.
(3) 목(갑상선)보호부
목 부위에 카라의 형태로 부착 고정되어 있어 따로 갑상선보호대를 착용하지 않아도 신속하게 차폐할 수 있는 역할
(4) 허리보호대
네오프렌이라는 탄성체를 이용하여 허리를 지지하여 하중을 분산시켜주는 역할을 한다.

15. Rad-Ban OPS/ OPM/ OPL/ OPXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 방사선사, 간호사, 치과의사, 등)를 위한 방사선방어용앞치마. 4개의 사이즈(S/M/L/XL)로 구성

본 내용은 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

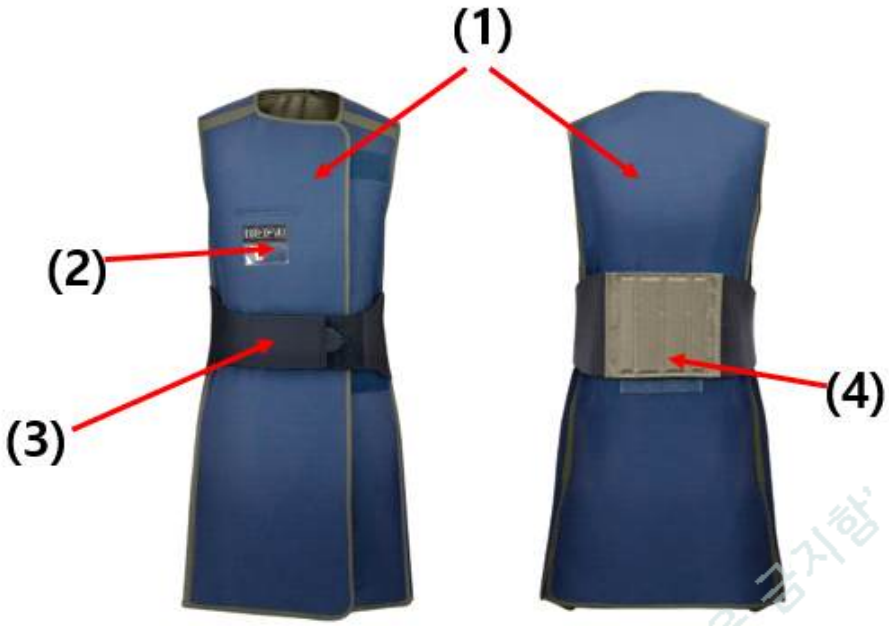


(1) 신체/생식선차폐부
전-후방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위가 이중 중첩 차폐되도록 벨크로로 고정한다.
(2) 명찰 투입부
이름표를 넣을 수 있는 비닐 캡.
(3) 고정용 허리띠
고정용 허리띠로 벨크로로 사이즈 조절을 하며, 방어복이 척추와 등에 주는 하중을 분산한다.
(4) 허리 지지대
방어복의 무게가 척추와 등에 주는 하중을 분산시키는 역할을 하며, 탈부착이 가능하며 허리선 조절을 할 수 있도록 벨크로가 부착되어 있다.

16. Rad-Ban TPS/ TPM/ TPL/ TPXL/ TPXXL

방사선 진단 촬영실 및 투시촬영실 등 방사선 촬영 구역에서 근무하는 전문가(의사, 방사선사, 간호사, 치과의사, 등)를 위한 방사선방어용앞치마. 방사선방어용 목(갑상선)보호대, 체부, 생식선 방어용 상의, 하의 투피스로 구성. 각 부위별 패턴이 설계, 제작되고, 이를 연결하는 부위에서 특수봉제, 탄성체연결, 중첩적 설계로 방사선의 누설을 최소화 한 구성. 5개의 사이즈(S/M/L/XL/XXL)로 구성.

이 서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함.

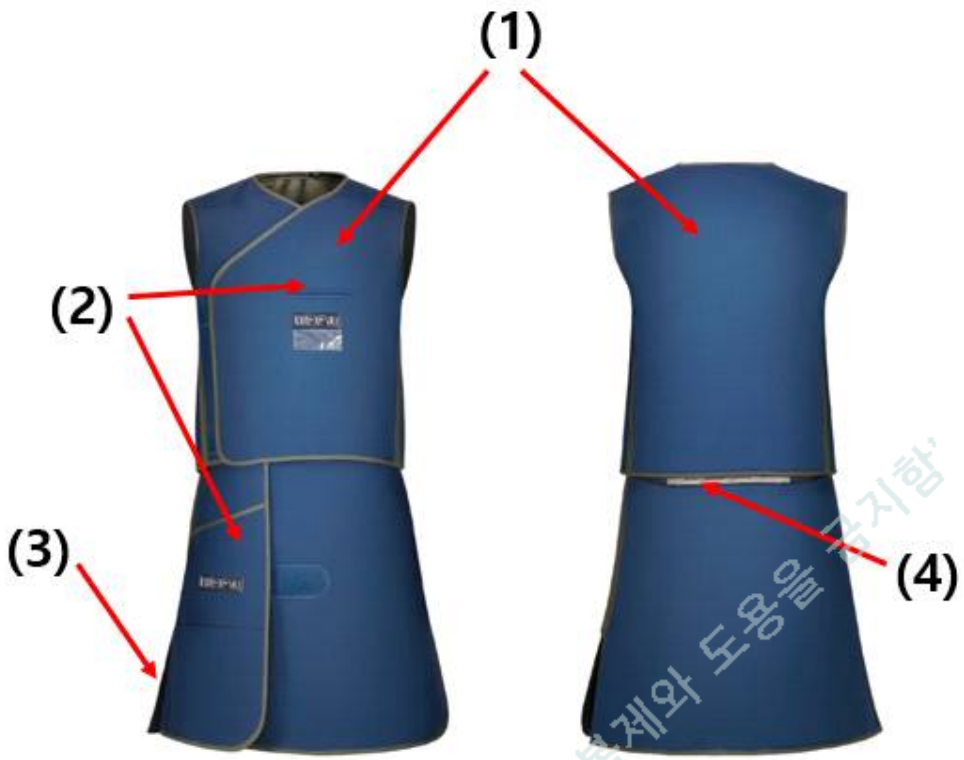

(1) 신체 차폐부
신체 전방/후방 보호대는 흉부의 종격동과 생식선 부위를 보호한다.
(2) 업무용 주머니
편리한 높이의 작업자가 필요한 서류나 물건을 보관할 수 있다.
(3) 옆트임
수직절개연결부-중복차폐를 시행하고 서고 앉는 활동 시 유연성을 제공한다.
(4) 허리 지지대
방어복의 무게가 척추와 등에 주는 하중을 분산시키는 역할을 하며, 탈부착이 가능하다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

색상옵션

No.	모델명	색상
1	Rad-Ban B	
2	Rad-Ban BS	
	Rad-Ban BM	
	Rad-Ban BL	
	Rad-Ban BXL	
	Rad-Ban BXXL	
3	Rad-Ban C	
4	Rad-Ban CR	
5	Rad-Ban PS	
	Rad-Ban PM	
	Rad-Ban PL	
6	Rad-Ban P2L	
	Rad-Ban P2XL	
	Rad-Ban P2XXL	
7	Rad-Ban P3L	
	Rad-Ban P3XL	
	Rad-Ban P3XXL	
8	Rad-Ban AS	
	Rad-Ban AM	
	Rad-Ban AL	
9	Rad-Ban A2S	
	Rad-Ban A2M	
	Rad-Ban A2L	
10	Rad-Ban BF	
	Rad-Ban BFL	
	Rad-Ban BFXL	
	Rad-Ban BFXXL	
11	Rad-Ban BF2S	
	Rad-Ban BF2M	
	Rad-Ban BF2L	
	Rad-Ban BF2XL	
	Rad-Ban BF2XXL	
12	RadBan BF5S	
	RadBan BF5M	
	RadBan BF5L	

'열람용'으로써, 무단 복제와 도용을 금지함

열 람 용


모양 및 구조 - 치수

No.	모델명	치수(단위 : cm)			
		어깨너비	앞기장	뒤기장	가슴둘레
1	Rad-Ban B	46	90	46	116
2	Rad-Ban BS	42	86	42	96
	Rad-Ban BM	44	94	46	106
	Rad-Ban BL	46	100	50	116
	Rad-Ban BXL	48	108	54	128
	Rad-Ban BXXL	50	108	54	138
3	Rad-Ban C	32	58	26	84
4	Rad-Ban CR	36	67	38	88
5	Rad-Ban PS	42	86	42	96
	Rad-Ban PM	44	94	46	106
	Rad-Ban PL	46	100	50	116
6	Rad-Ban P2L	46	100	63	116
	Rad-Ban P2XL	48	108	65	128
	Rad-Ban P2XXL	50	108	65	138
7	Rad-Ban P3L	46	100	63	116
	Rad-Ban P3XL	48	108	65	128
	Rad-Ban P3XXL	50	108	65	138
8	Rad-Ban AS	42	86	42	96
	Rad-Ban AM	44	94	46	106
	Rad-Ban AL	46	100	50	116
9	Rad-Ban A2S	42	86	-	96
	Rad-Ban A2M	44	94	-	106
	Rad-Ban A2L	46	100	-	116
10	Rad-Ban BF	44	94	-	106
	Rad-Ban BFL	46	100	-	116
	Rad-Ban BFXL	48	108	-	128
	Rad-Ban BFXXL	50	108	-	138
11	Rad-Ban BF2S	42	86	-	96
	Rad-Ban BF2M	44	94	-	106
	Rad-Ban BF2L	46	100	-	116
	Rad-Ban BF2XL	48	108	-	128
	Rad-Ban BF2XXL	50	108	-	138
12	Rad-Ban BF5S	42	86	-	96
	Rad-Ban BF5M	44	94	-	106
	Rad-Ban BF5L	46	100	-	116
	Rad-Ban BF5XL	48	108	-	128
	Rad-Ban BF5XXL	50	108	-	138

이 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함

열 람 용

13	Rad-Ban PA2S	42	86	-	96
	Rad-Ban PA2M	44	94	-	106
	Rad-Ban PA2L	46	100	-	116
	Rad-Ban PA2XL	48	108	-	128
	Rad-Ban PA2XXL	50	108	-	138
14	Rad-Ban PA3S	42	86	-	96
	Rad-Ban PA3M	44	94	-	106
	Rad-Ban PA3L	46	100	-	116
	Rad-Ban PA3XL	48	108	-	128
	Rad-Ban PA3XXL	50	108	-	138
15	Rad-Ban OPS	42	86	86	96
	Rad-Ban OPM	44	94	94	106
	Rad-Ban OPL	46	100	100	116
	Rad-Ban OPXL	48	108	108	128
16	Rad-Ban TPS	42	86	86	96
	Rad-Ban TPM	44	94	94	106
	Rad-Ban TPL	46	100	100	116
	Rad-Ban TPXL	48	108	108	128
	Rad-Ban TPXXL	50	108	108	138

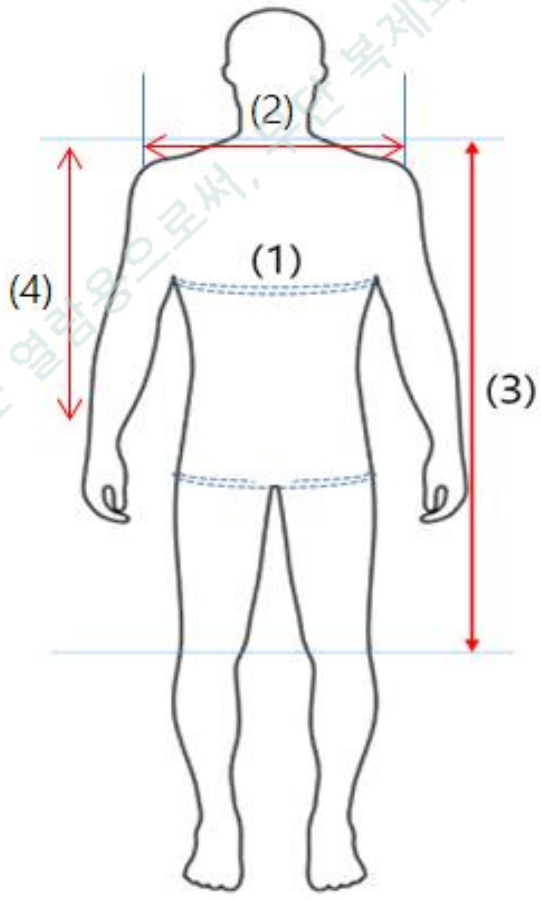

(1) 가슴둘레 (2) 어깨너비 (3) 앞기장 (4)뒤기장

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

사용목적

방사선을 방어하기 위한 앞치마

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

성능

No.	모델명	성능(납당량 mmPb)
1	Rad-Ban B	0.25mmPb 이상
2	Rad-Ban BS	
	Rad-Ban BM	
	Rad-Ban BL	
	Rad-Ban BXL	
	Rad-Ban BXXL	
3	Rad-Ban C	
4	Rad-Ban CR	
5	Rad-Ban PS	
	Rad-Ban PM	
	Rad-Ban PL	
6	Rad-Ban P2L	
	Rad-Ban P2XL	
	Rad-Ban P2XXL	
7	Rad-Ban P3L	
	Rad-Ban P3XL	
	Rad-Ban P3XXL	
8	Rad-Ban AS	
	Rad-Ban AM	
	Rad-Ban AL	
9	Rad-Ban A2S	
	Rad-Ban A2M	
	Rad-Ban A2L	
10	Rad-Ban BF	
	Rad-Ban BFL	
	Rad-Ban BFXL	
	Rad-Ban BFXXL	
11	Rad-Ban BF2S	
	Rad-Ban BF2M	
	Rad-Ban BF2L	
	Rad-Ban BF2XL	

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

	Rad-Ban BF2XXL	
12	Rad-Ban BF5S	
	Rad-Ban BF5M	
	Rad-Ban BF5L	
	Rad-Ban BF5XL	
	Rad-Ban BF5XXL	
13	Rad-Ban PA2S	
	Rad-Ban PA2M	
	Rad-Ban PA2L	
	Rad-Ban PA2XL	
	Rad-Ban PA2XXL	
14	Rad-Ban PA3S	
	Rad-Ban PA3M	
	Rad-Ban PA3L	
	Rad-Ban PA3XL	
	Rad-Ban PA3XXL	
15	Rad-Ban OPS	
	Rad-Ban OPM	
	Rad-Ban OPL	
	Rad-Ban OPXL	
16	Rad-Ban TPS	
	Rad-Ban TPM	
	Rad-Ban TPL	
	Rad-Ban TPXL	
	Rad-Ban TPXXL	

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

사용방법

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 상태를 확인하여 파손이 있는지 확인한 후 착용한다.

나. 사용방법

벨크로를 이용하여 사이즈조절을 한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

보관이나 사용 중 파손을 피해야 한다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

사용 시 주의사항

1. 사용목적 이외에 다른 용도로 사용하지 않는다.
2. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의한다.
3. 접어서 보관하거나 눌리지 않도록 주의한다.
4. 주기적으로 균열 상태를 점검하여 균열 시 교체 또는 폐기한다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'