열람용

제신 22-472 호

의료기기 제조 신고증

(업 허가번호 : 제 5882 호)

구 분	[✔] 제조 / [ ] 수입	[✔] 품목 / [ ] 품목류	
명 칭 (제품명, 품목명, 모델명)	주식회사 디알뷰(DR-VU CO.LTD) · Rad-Ban B/C,방사선 방어용커튼,Rad-Ban B/C 025 외 3건	분류번호(등급)	A15030.06 (1)
모 양 및 구 조	별첨		
원 재 료	해당없음		
성 능	별첨		
사 용 목 적	별첨		
사 용 방 법	별첨		
사용 시 주의사항	별첨		
제조(수입)업자 정보	제조(수입)업자 : 주식회사 디알뷰(DR-VU CO.LTD), 서울특별시 중랑구 동일로96길 40 지층(면목동) 제조원 : 상동		
허 가 조 건	없음		
소 재 지	서울특별시 중랑구 동일로96길 40 지층(면목동)		
비 고	유효기간 (2022.04.12 ~ 2027.04.11)		

「의료기기법」 제6조 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 신고를 수리합니다.

2022 년 04 월 12 일

한국의료기기안전정보원장 (인)

National Institute of Medical Device Safety Information
NIDS

열람용

(뒤 쪽)

변경 및 처분 사항 등	
년 월 일	내 용
2022-04-12	최초허가

제 품 명
Rad-Ban B/C

모 델 명	
일련번호	모 델 명
1	Rad-Ban B/C 025
2	Rad-Ban B/C 035
3	Rad-Ban B/C 050
4	Rad-Ban B/C 100

제조원	
일련번호	제조의뢰자
1	
일련번호	제조자

본 문서는 열람용으로써, 무단 복사와 도용을 금지함

열람용

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

모양 및 구조 - 작용원리

방사선 치료 및 진단을 위한 Anglo, Remote 및 C-Arm 등의 장비 이용 시 환자의 침대 하부에서 조사되는 엑스선의 노출에 의한 시술자 및 환자의 방사선 피폭을 줄이기 위해 무납의 방사선 차폐시트를 이용하여 제작된 방사선 방어용 차폐커튼이다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용


모양 및 구조 - 외형

가. 외형사진

No.	모델명	외형
1	Rad-Ban B/C	

나. 외형설명

1. Rad-Ban B/C	시술자가 위치하는 테이블 양쪽 방향이 차폐되어 방사선의 피폭을 줄여 줍니다.

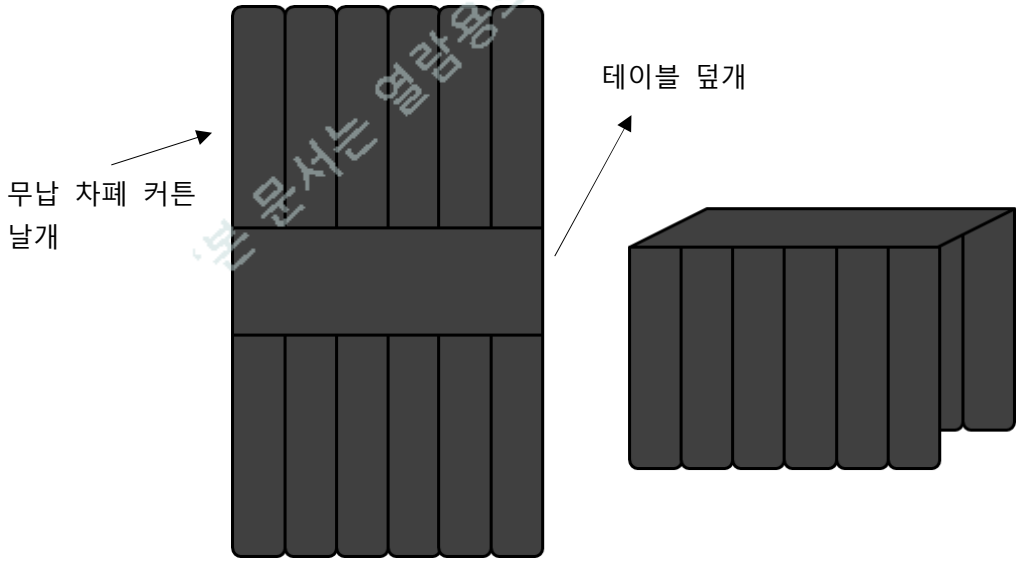

본 문서는 열람용으로서, 무단 복제와 도용을 금지함.

열 람 용


1) 무납 차폐 커튼 날개(Lead-free Radiation Protection curtain Wing): 무납의 방사선 차폐 시트로 제작하여 시술자에게 피폭 되는 방사선를 차폐함 2) 테이블 덮개(Table Cover) : 환자의 침대 및 테이블 등에 위치 시켜 양쪽으로 차폐 커튼이 위치 될 수 있도록 함


'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열람용

모양 및 구조 - 치수

No.	모델명	치수(단위 : cm)			수량
		길이(L)	높이(H)	폭(W)	
1	Rad-Ban B/C	100	60	70	1

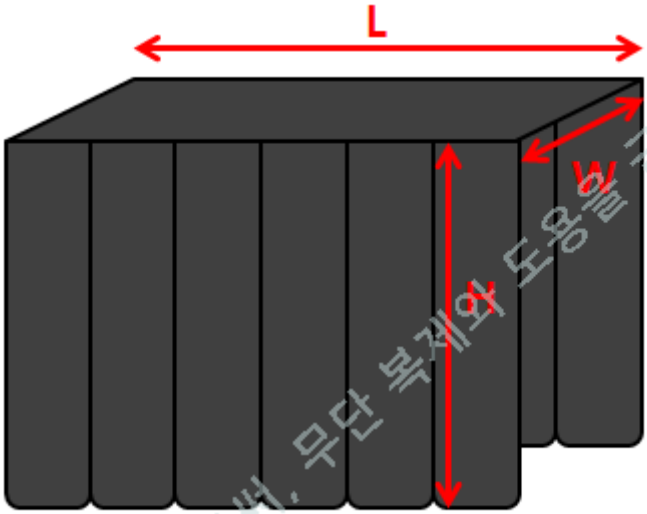

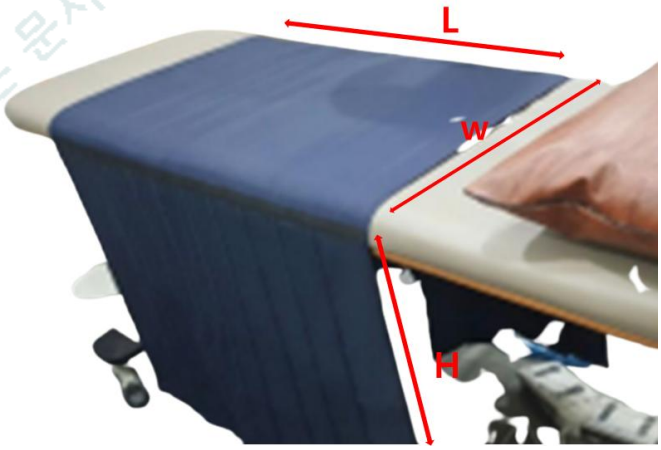

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

사용목적

방사선을 방어하기 위한 커튼

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

성능

모델명	납당량(mmpb)
Rad-Ban B/C 025	0.25
Rad-Ban B/C 035	0.35
Rad-Ban B/C 050	0.5
Rad-Ban B/C 100	1.0

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

사용방법

가. 사용 전 준비사항

1. 사용 전 제품의 상태를 확인하여 파손이 있는지 확인한 후 착용한다.

나. 사용방법

1. 테이블 위에 제품을 올려 놓는다
2. 테이블 덮개 부분이 테이블의 가운데에 오도록 가지런히 펴서 놓고 날개부분을 아래로 내린다
3. 날개부분이 접히거나 벌어지지 않도록 가지런히 한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1. 사용 후 물티슈 또는 부드러운 천에 물을 묻혀 짜낸 후 닦고 충분히 건조 해 준다.
2. 제품 표면에 오명 물질이 묻은 경우 물티슈 또는 물걸레를 이용하여 즉시 제거한다.
3. 제품은 사용 후 가지런히 펴서 보관한다.
4. 접히거나 눌리지 않도록 한다.
5. 보관이나 사용 중 파손을 피해야 한다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'

열 람 용

사용 시 주의사항

1. 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의 한다.
2. 접어서 보관하거나 눌리지 않도록 한다.
3. 용도 이외에 다른 목적으로 사용하지 않는다.
4. 주기적으로 검사하여 균열 및 찢김이 있을 시에는 교체한다.

'본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 도용을 금지함'